



Aktiválja az életét
Aktiválja a sejteket



WHIEDA – SEJTAKTIVÁTOR

fejlett technológia, ami meg fogja
változtatni a világot!




„ A BENNÜNK REJLŐ TERMÉSZETI ERŐK A BETEGSÉGEK IGAZI GYÓGYÍTÓI.“

Az 1980-as években amerikai tudósok felfedeztek egy olyan frekvenciát, amely megfelel az emberi sejtek rezgési frekvenciájának - a terahertzes hullámokat. A terahertz hullámok ugyanolyan frekvencián rezegnek, mint a normál emberi sejtek, és másodpercenként több millió rezgést generálnak.

Az emberi testünk is termel terahertzes frekvenciákat. A csecsemők több, míg az idősök és a betegek kevesebb és gyengébb terahertzes frekvenciát bocsátanak ki.

" Ha van mód a csontok felmelegítésére, akkor minden betegség gyógyítható."


Hippokrates

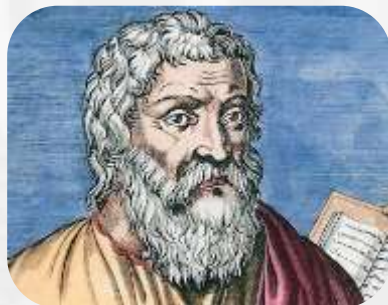

„MINDEN REZGÉS”

Jelentőségteljes szavak, amelyek mélységét számtalan tudományos tanulmány bizonyította, amelyek érvényességét minden élet alapfeltételeként, egy elemi részecske „legkisebb alkotóelemeként” megerősítették. Mindennek, ami van, megvan a maga jellegzetes frekvenciája. Erős, gyenge, fiziológiai, kóros.

A frekvenciák és rezgésminták minden élő folyamathoz és klinikai képhez hozzárendelhetők.

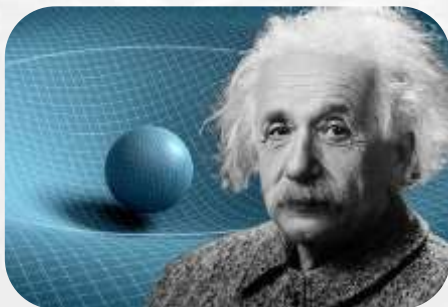

**"A jövő gyógyszere a
frekvenciák gyógyszere
lesz."**

Albert Einstein

TERAHERTZ

A 10 LEGINNOVATÍVABB TECHNOLÓGIA, AMELY MEGVÁLTOZTATHATJA A VILÁGOT

Az "**élet fénye**" terahertzes hullámai gyorsan, 20 cm mélységig behatolhatnak az emberi testbe, és képesek...

Elpusztítani az egészségtelen sejteket

A terahertz frekvenciájú energia rezonál normál sejteinkkel. Minden abnormális vagy mutált sejt felszívódik és eliminálódik.

AKTIVÁLNI AZ ALVÓ SEJTEKET

A terahertz-frekvencia mérsékelt hőmérsékleten elnyeli és aktiválja a sejteket, megszüntetve az alvó sejteket.

ELŐSEGÍTENII AZ ÖNGYÓGYÍTÁST

A terahertz frekvencia indukálja és erősíti a DNS-t és a szerves molekulákat, és rezonál sejteinkkel, elősegítve az öngyógyítást.

FELSZABADÍTANI A MERIDIÁNOKAT ÉS A NYIROKRENDSZERT

Ellazítja a meridiánokat, stimulálja az akupunktúrás pontokat, tisztítja a vért és elősegíti az anyagcserét.

JAVÍTJA A MIKROKERINGÉST

A terahertzes frekvencia tágítja az ereket, csökkenti a véráramlás és viszkozitás ellenállást.

SZABÁLYOZZA A MIRIGYEKET

Szabályozza a belső elválasztású mirigyek működését és védi szerveinket.

MEGSZÜNTETI A TESTNEDVESSÉGET

Eltávolítja az egészségtelen testnedvességet és kiegyensúlyozza a szervezet immunrendszerét.

JAVÍTJA A VÉRKERINGÉST

Eltávolítja a vér szennyeződéseit, tisztítja a belső vérkeringést és eltávolítja az elzáródásokat, puhítja az ereket és a csomókat.

**KÖNNYEBB ÉS OLCSÓBB
AZ EGÉSZSÉG FENNTARTÁSA
MINT A BETEGSÉGEK ELLENI KÜZDELEM**

EGY ÓRA WHIEDA SEJTAKTIVÁTORRAL TÖRTÉNŐ KEZELÉS EGYENLŐ



30 Gua Sha



40 masszáz



20 köpöly kezelés



10 akupunktúra

ÁLLÍTSA VISSZA ÉRTÉKES EGÉSZSÉGÉT A WHIEDA SEJTAKTIVÁTORRAL:

Jelenleg az emberek világszerte különféle egészségügyi válságokkal néznek szembe, amelyek közé tartozik a négy „leghalálosabb betegség” is, mint például a szív- és érrendszeri betegségek, a COPD, a tüdőtágulás és a rák. A világstatisztikák szerint a lakosság 54%-a szembesül e betegségek végzetes következményeivel. Az emberek krónikus betegségekben szenvednek, mert egyre nehezebbnek tűnik természetes eszközökkel kezelni a betegségeket, és gyakran csak gyógyszeres kezeléssel lehet enyhíteni és/vagy kontrollálni.

A **sejtek** a legtöbb betegség kiváltó okai, és ez a sejthiányhoz kapcsolódik. A károsodott testi funkciókat a gyenge immunrendszer, az eltömődött erek, a sérült és mutálódott sejtek stb. okozzák. Ezek mind súlyos betegségek okai.

A KUTATÁSOK AZT MUTATJÁK,
HOGY A WHIEDA SEJTAKTIVÁTOR,
ÚN. TERAHERTZES FREKVENCIÁK,
TELJESEN BIZTONSÁGOS
AZ EMBERI SZERVEZET SZÁMÁRA!

A WHIEDA SEJTAKTIVÁTOR AZ EGÉSZSÉG ÉS A JÓLÉT ÚJ KORSZAKÁNAK TERMÉKE.

A **terahertzes hullámok** frekvenciája az infravörös és a mikrohullámú sugárzás között helyezkedik el, hullámhosszuk 30 és 3000 mikron között van, ugyanez a hullámhossz az emberi sejtek által elnyelt hullámhossz.

Amikor a sejteket terahertzes frekvenciákkal besugározzák, az emberi szervezetben az energia gyorsan megnő, és az inaktív sejtek aktiválódnak. A sugárzás energiája mindössze egy negyvenede a napfénynek és egy ezredrésze a mobiltelefon frekvenciájának..

A terahertz-frekvencia behatolása a bőr, a belső szervek és a csontmag alatti 20-30 cm-t is elérheti, melynek eredményeként a szervezetben az erek és a nyirok folyamatosan ellazulnak, tisztulnak. Ezáltal a mikrokeringés egyidejűleg javul, a bőr táplált, az egészségtelen vagy sérült területek helyreállnak, a nekrosis megszűnik, a belső szervek gyógyulnak, a sejtek tovább erősödnek.

EGY WHIEDA SEJTAAKTIVÁTOR ÉLETET HOZ MINDEN OTTHONBA!

A Kínai Tudományos Akadémia és a Sinochem által tanúsított, elismert és szabadalmaztatott. A készüléket bárki használhatja, beleértve a kisgyermeket is.

Nincs szükség különleges ismeretekre. Egyszerűen csak fújjon arra a területre, amely kellemetlen Önnek. A készüléket kifejezetten terápiás és fizioterápiás kezelésekhez használják.



**Nátha, torokgyulladás,
gyomorhurut, nőgyógyászati
gyulladások, prosztata stb.**



**Váll- és nyakfájás,
ízületi fájdalom,
hátfájás, fejfájás,
dysmenorrhoea,
isiász stb.**



ÉS ALKALMAS:



Különféle blokkok

Meridián-elzáródások,
nyirokcsomó-elzáródások,
visszérbetegségek,
cukorbetegség és magas
vérnyomás stb.



A bőr szépsége

Pattanások, pattanásos
hegek, foltok, öregedésgátlás,
szépségápolás, különböző
bőrbetegségek stb.

NEM AJÁNLOTT :



Akút betegségben
szenvedők



Implantátumokkal, nyílt
sebekkel és törésekkel
rendelkező személyek



Terhes nők és
nők erős menstruációval



Veleszületett szívhibákban
szenvedők

A WHIEDA SEJTAKTIVÁTOR 7 FUNKCIÓJA

1. AZONOSÍTÁS

- Képes kimutatni az elzáródásokat, gyulladásokat és daganatokat a szervezetünkben.
- Fájdalom, égő és bizsergő érzés a problémás területeken.
- A hagyományos kínai orvoslás szerint: az elzáródás fájdalmat okoz, ha nincs fájdalom azt jelenti, hogy nincs elzáródás

☞ Elv: A terahertzes frekvencia 20-30 cm távolságig képes áthatolni a bőrön. Ez lehetővé teszi, hogy elérje a csontvelőt. Az elzáródott területek fájdalmasak lesznek.

2. AZ EGÉSZSÉGTLEN SEJTEK ELTÁVOLÍTÁSA

- Egy bizonyos idő elteltével a sejtaktivátor használatával az összes abnormális vagy mutálódott sejt felszívódik és megszűnik, és a fájdalom fokozatosan megszűnik.

☞ Elv: A terahertz-hullámok rezgése megegyezik a normális sejtjeink rezgésével, a kóros vagy mutálódott sejtek a terahertz-energia nagy részét elnyelik és megsemmisülnek. A sejtaktivátor használata előtt ajánlott meleg vizet inni, hogy segítsen az egészségtelen sejtek eltávolításában.

3. A LASSÚ SEJTEK AKTIVÁLÁSA

– A terahertzes frekvencia mérsékelt hőmérsékleten elnyeli és aktiválja a sejteket, megszüntetve az inaktív sejteket. A sejtaktivátor használata után a test kellemesebbnek és energiával telibbnek érzi magát.

☞ Elv: A normális sejtek elnyelik a terahertzes energiát és kissé megemelik a hőmérsékletüket, az inaktív sejtek aktiválódnak - Hippokratész, az ókori görög orvoslás atyja szerint minden betegség gyógyítható, ha van mód a csontok felmelegítésére.

4. A SÉRÜLT SEJTEK JAVÍTÁSA FOKOZZA AZ ÖNGYÓGYÍTÁST

– A sejtaktivátor napi alkalmazása a test bizonyos részein elősegíti sejteink regenerálódását. A terahertzes frekvencia csökkenti és erősíti a DNS-t és a szerves molekulákat, és rezonál sejteinkkel, hogy elősegítse az öngyógyítást.

☞ Elv: A terahertzes frekvencia azonos rezonanciával rendelkezik a normál sejtekkel. Erősíti a szerves DNS-molekulákat a testsejtek önjavításának fokozásával.

5. TISZTÍTJA A NYIROKRENDSZERT - TISZTÍTJA A MERIDIÁNOKAT ÉS A NYIROKRENDSZERT

– A sejtaktivátor alkalmazása a nyirokterületen segít megtisztítani a vér szennyeződéseit és a test belsejét, javítja a vérkeringést, eltávolítja a vérrögöket és lágyítja az ereinket. A terahertzes frekvenciák ellazítják a meridiánokat, stimulálják az akupunktúrás pontokat, tisztítják a vért és fokozzák az anyagcserét.

☞ Elv: A terahertz hullám kitágítja az ereket, csökkenti a vér áramlás és viszkozitás ellenállását, javítja a vérkeringést és megelőzi a betegségeket.

6. TISZTÍTJA A MERIDIÁNOKAT ÉS JAVÍTJA A MIKROKERINGÉST

– Serkenti az akupunktúrás pontokat, javítja a qi-keringést, javítja a vérkeringést és növeli az anyagcserét. A terahertzes frekvenciák kitágítják az ereket, csökkentik a véráramlás és viszkozitás ellenállását.

☞ Elv: A terahertz frekvencia rezonál a normál sejteinkkel, javítja a vérkeringést, tisztítja a meridiánokat és erősíti a testünket.

7. SZABÁLYOZZA A MIRIGYEKET ÉS ELTÁVOLÍTJA A NEDVESSÉGET A TESTBŐL

– A terahertzes frekvenciák szabályozzák az endokrin mirigyeket és védik szerveinket. A testünkre alkalmazva megszünteti a felesleges testnedvességet és kiegyensúlyozza a testünk savas és lúgos egyensúlyát.

☞Elv: A normál sejtek könnyen elnyelik a terahertzes energiát, és enyhén megemelik a hőmérsékletet, hogy felmelegítsék a testünket és eltávolítsák az egészségtelen testnedvességet.



ENNEK A KÉSZÜLÉKNEK MINDEN OTTHONBAN OTT KELLENE LENNIE.

IDEÁLIS A MINDENNAPI OTTHONI HASZNÁLATRA ÉS AZ EGÉSZ CSALÁD SZÁMÁRA.

HOGYAN HASZNÁLJÁK A WHIEDA SEJTAKTIVÁTORT?

1. A kezelés előtt és után mindig igyon meg 1-2 pohár meleg vizet, amelyet sejtaktivátorral kezeltek.


2. Próbálja meg közvetlenül a bőrre irányítani. Ruházaton keresztül is lehet használni!

3. Ha a vérsejtek egészségesek, javul a vérkeringés. Most már hatékonyan tudja szállítani az oxigént és a tápanyagokat a többi sejthez, miközben a méreganyagokat és az elhalt sejteket eltávolítja.

4. Ha a meridiánsejtek egészségesek, az idegrendszer blokkolása feloldódik. A szervek táplálkozhatnak, és újra normálisan és hatékonyan működhetnek. A fájdalom megszűnik.

5. A kezelés után néhány órán át ajánlott melegen tartózkodni, ne egyen hideg ételt, és ne zuhanyozzon hideg vízzel. Ne használjon ventilátort vagy légkondicionálót a kezelés után.

6. Először melegítsünk be a testen az alábbi 10 pontot egymás után 1-3 percig, hogy a test átmelegedjen. Ezután hosszabb ideig kezelje a fájdalmas vagy beteg területet.

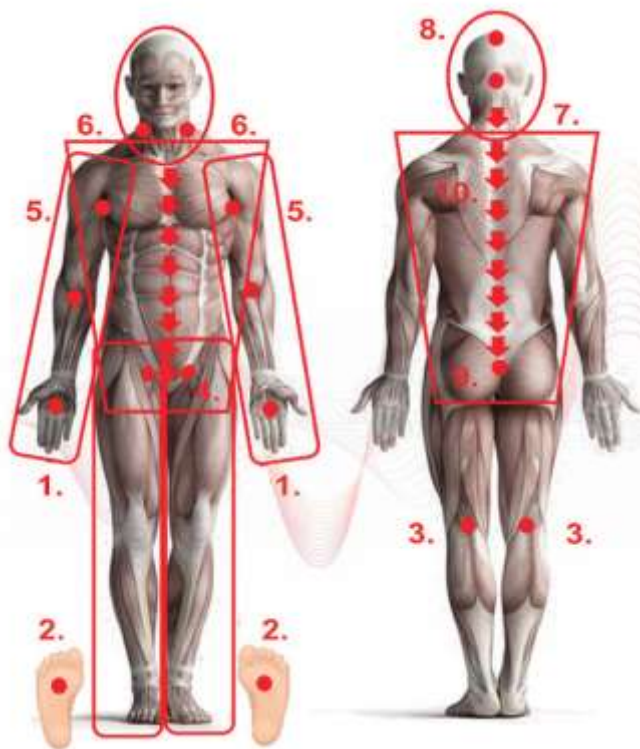

1. a 2.

Mindkét kéz és láb
elülső és hátsó része

3. Mindkét térd hátsó
része

4. Lágyék területe

5. Hónalj

6. Nyaki nyirokcsomók

7. Nyaki gerincoszlop
hátsó a nyíl irányában

8. Fej (magas
vérnyomás esetén
hagyja ki)

9. Farkcsont a hátsó
területen

10. Gerinc a nyíl
irányába

1. FEJFÁJÁS

Ami a nyaki gerincet illeti, először a nyakra, majd a fejre fújjon. Fújj a egész vállat és a nyakat 20 percig, majd: fülnyirok és a fej 25 percig, összesen 45 percig.

(Előfordulhat, hogy fejfájás vagy álmatlanság tüneteit tapasztalja, ami már javulást jelez)



2. HAJPROBLÉMÁK

Először 20 percig fújj a nyakat és az egész hátat, majd 20 percig a veséket, a gyomor hátsó és elülső részét és a lép területét, végül 20 percig a fejet. Összesen 60 perc.



3. ARC:

A belső szervek szabályozásához fújja 25 percig a nyakra és az egész hátra. Ezután 20 percig az arcra, összesen 45 percig

4. SZEMEK :

Fújja a nyak, a hát és a máj területét a derék közepén 20 percig, majd fújja a szemét 25 percig, összesen 45 percig (száraz, viszkető szem vagy pillanatnyi homályos látás kezelésére).





5. FOGFÁJÁS/SZÁJFEKÉLY :

Először fújja a torkába, a tüdő elülső és hátsó részébe 25 percig, majd a fogfájás/fekély területére 20 percig, összesen 45 perc.

6. TOROKFÁJÁS/KÖHÖGÉS :

Először fújjon 20 percig a torok területére, a tüdő elülső és hátsó részére, majd fújjon 20 percig az egész torokra és a torok nyirokcsomóira, majd fújjon 5 percig a nyitott szájba.





7. ORRFOLYÁS/ ORRPROBLÉMÁK :

Először a nyak területét kezelje 25 perccig, a tüdő elülső és hátsó részét 25 perccig, majd fújja az orr körül 20 perccig.

8.HIDEG/CSÖPÖGŐ ORR :

Először fújjon 20 perccig a nyakába és a hátába, majd 25 perccig a tüdeje elejére és hátuljára, végül 15 perccig az orrába.





9. LÁZ :

Fújja a tenyerét, a talpát, a mellkas elülső részét, a hátat, a nyaki gerincet és a fejet 5-7 percre.

10. MELLPROBLÉMÁK :

Először a nyakra és az egész hátra fújjon 20 percig, majd a lapockákra, aztán a hónalji nyirokcsomóra 20 percig, végül a mellkas területére 20 percig (ha a mellék hiperpláziája van, fújás közben masszírozhatja őket.)





11. VÁLL- ÉS NYAKPROBLÉMÁK :

Fújja a tenyerét és a talpát 15 percig, a nyakát és az egész vállát 30 percig, összesen 45 percig. (Az ujjak és a kéz zsibbadása és fájdalma általában nyaki gerincproblémára utal. Ezután folytassa az ujjak és a kezek fűzését)

12. HÖRGHURUT/ASZTMA :

Először a nyakra és a hátra fűjjon 20 percig, majd a tüdő elejére és hátuljára 20 percig, végül a nyakra és az orra fűjjon 20 percig.



13. A lép emésztőrendszeri fizioterápiája :

Először fújja a nyakra és az egész hátra
25 percig, majd fújja a lép és a
gyomor területére 20 percig, összesen
45 percig **(ne használja, ha a gyomor
vérzik).**




14. SZÉKREKEDÉS, BÉLPROBLÉMÁK :

Először az egész hátat, majd a tüdő
területét fújja 20 percig, végül a has
egész elejét 25 percig, összesen 45
percig.

15. NŐGYÓGYÁSZATI PROBLÉMÁK :

Először fújja az egész feneket és a derekat, leginkább a Ming men ponton 30 percig, majd fújja az elülső ágyékot és az alhasat 10 percig. Végül állítsa az aktivátort alacsonyra, hogy 20 percig fújjon a gátra. (A folyás, a menstruációs zavar a kezelés hatásainak jelei).

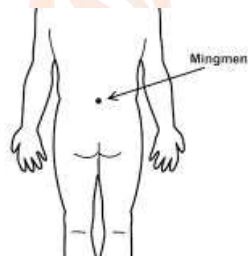

16. DERÉKFÁJÁS :

Fújja a tenyerét és a talpát 10 percig, majd az egész hátat és a nyakat 20 percig, végül a fájdalmas területet 20 percig.





17. FÉRFI NEMI SZERV, PROSZTATA PROBLÉMÁK :

Először fújja az egész derék és a vese területét, leginkább a Ming men ponton 30 percig, majd fújja az elülső ágyékot és az alhasat 10 percig, végül fújja a gátat álló helyzetben 20 percig. Ehhez állítsa az aktivátort alacsony fokozatra.

18. ARANYÉR KEZELÉSE :

A belső szervek szabályozásához először fújjon 20 percig az egész hátra, erősítse a tüdő területét, majd fújjon 20 percig az aranyérre, majd fújjon 20 percig a tenyérre és a talpra 20 percig.





19. LÁBGOMBA ÉS ONYCHOMYCOSIS :

Először fújjon 30 percig a hátára, hogy erősítse a máj és az epehólyag területét, majd fújjon 30 percig a lábára, összesen 60 percig.

20. BŐRPROBLÉMÁK :

Először fújja végig a hátat, inkább a tüdő területét, majd fújja a bőr problémás területeit 20-30 percig minden kezelésnél. (Ennek során a bőr jobban viszket vagy pattanások képződnek, ez gyógyító hatás)





21. SEBEK:

Egyszerűen fújja a sebre (nem vérző sebre) körkörös mozdulatokkal 15 percig. Napi 2-3 alkalommal

22. ÁLMATLANSÁG ÉS ROSSZ ALVÁS :

Először fújja a vállat, a nyakat és a hátat 25 percig, majd fújja az egész fejet 25 percig, összesen 50 percig.





23. MANDULA GYULLADÁS (TOROKFÁJÁS):

Először fújjon a vállra és a nyakra 20 percig, majd fújjon közvetlenül a torokra 25 percig, be- és kilégzéssel. (Ha a folyamat során lázas és több orrfolyás van, ez normális kezelési hatás, folytassa a terápiát)

24. HIPERTIREÓZIS:

Először fújjon 25 percig a nyakra, a máj elülső és hátsó részére, majd 25 percig a pajzsmirigy túlműködésére (a folyamat során pattanások, bőrpír és melegség jelentkezhet, mint normál méregtelenítési tünetek).





25. VISSZÉR :

Először fújjon 10 percig a tenyérre és a talpára, majd fújjon 25 percig az egész háton, inkább a fő idegekre és a tüdő területére, és végül fújjon 25 percig a visszerekre. (viszketés, hólyagosodás a javulás jelei)

26. KÖSZVÉNY :

Először 10 percig fújjon a tenyérre és a talpra, majd a teljes háton fújjon többet a lép, gyomor, máj, epehólyag és vesék területére 25 percig, majd fújjon a fájdalmas területre 25 percig, (fújás, fájdalom egy másik területen a javulás jele)





27. REUMATIKUS ÍZÜLETFÁJDALOM :

Először fújjon a tenyérre és a lábra 10 percig, utána a hátára 20 percig, majd 30 percig fújjon minden ízületre, különösen a fájdalmas ízületekre.
(ha hólyagok jelennek meg, az fájdalmasabb, de javító hatású)

28. ELHÍZÁS, FOGYÁS ÉS HIDRATÁLÁS :

Először fújja a tenyerét és a talpát 10 percig. Ezután fújjon az egész hátára, inkább a lép, a gyomor, a máj és az epehólyag területére 25 percig, majd fújjon a has elülső részére, mindkét combra 25 percig.





29. MAGAS VÉRNYOMÁS :

Először a tenyerekre és a kezek külső oldalára fújjon 30 percig, majd a talpra és a lábfej belső oldalára 30 percig. Ha jobb, fújjon a hátára 30 percig.

Megjegyzés: Ha az első héten magas a vérnyomása, ne a fejre fújjon, hanem a hátára. Ha felfelé fújja, jobban izzad, és a vérkeringés felgyorsul.

30. VÉRCUKOR :

Először fújjon a tenyérre és a kéz külső oldalára 30 percig, majd fújjon a talpra és a lábfej belső oldalára 30 percig, majd fújjon a test elülső-középső részére az álltól a hólyagig, fentről lefelé 30 percig (Megjegyzés: Az alacsony vércukorszintre alkalmazott terápia időtartama nem lehet túl hosszú, és ügyelni kell a szervezet energiájának feltöltésére).





31. HEMIPLÉGIA:

Fújja végig a testét, először a tenyerét és a talpát. Lábak, kezek és lábak, beleértve a nyirokrendszert is 30 percig, majd a fej és a tarkó, nyak 30 percig. Koncentráljon és erősítse a hátsó és elülső véna meridiánját 30 percig.

32. A HIDEG ÉS A NEDVESSÉG ELTÁVOLÍTÁSA :

Először a tenyérre és a talpra fújjon 20 percig, majd fújjon az egész hátat 30 percig, még inkább a lép, a gyomor és a köldök részt. összesen 50 percig.





33. FÜLEK:

Először a nyak, a derék és a vese területét kezelje 20 percig, majd a füleket 25 percig, összesen 45 percig. (A fülek gyakori fújása szabályozhatja a zsigeri terület működését).

34. KÖHÖGÉS ÉS MEGFÁZÁS :

Fújja végig a hátat és a nyakat, inkább a középső testrészt és a hasi területet, a tüdő elülső és hátsó részét 25 percig. Ezután fújja végig a nyakát további 20 percig, összesen 45 percig.





35. A vesék és a jang felélesztése :

Először a tenyérre és a talpra fújjon 20 percig, majd fújjon a hátra 30 percig, fújjon többet a közepére, a vesékre, majd a köldökre..



UTASÍTÁSOK :

Száraz, tiszta helyen, közvetlen napfénytől védve, legfeljebb 25 fokos hőmérsékleten tárolja, a páratartalom nem haladhatja meg a 75%-ot. Vigyázat! **Ez a készülék nem speciális orvosi eszköz.** Ha bármilyen betegségben szenved, mindenképpen forduljon orvosához. **A garancia a vásárlástól számított 24 hónap + 1 hónap szállítási idő,** és nem tartalmazza azt az időt, amikor az áru raktáron volt.



Ezer betegség van, de csak
egy egészség..

Carl Ludwig Börne (1786 – 1837)
német újságíró



WHIEDA

Nemzetközi Szövetség
Egészség és jólét

